


Fotonska podloga za zagrevanje

Model: PR-C06

Uputstvo za upotrebu

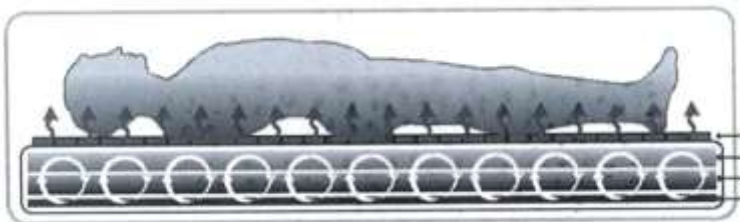

1. Poboljšava ljudsko magnetno polje, čuva energiju
2. Stimuliše kožu dubinski i smanjuje bol
3. Unapređuje cirkulaciju, aktivira ćelije
4. Balansira ph tela
5. Poboljšava imunološku funkciju
6. Podstiče metabolizam, poboljšava mikrocirkulaciju

Šta su daleki infracrveni zraci?

Dugi infracrveni zraci su deo spektra svetlosti koji isijava sunce. Dugi infracrveni zraci nisu vidljivi, ali ih osećamo kao toplotu koja prodire kožu. Dok svaka svetlost prenosi energiju sa jednog mesta na drugo, infracrveni zraci, čije je doslovno značenje „ispod crvenih“, označava emanaciju toplotne energije.

Kada se toplotni sistem u Podlozi uključi, infracrveni zraci ulaze u kožu.

Za duge infracrvene zrake je dokazano da popravljaju cirkulaciju, metabolizam i da ojačavaju imuni sistem. Oni mogu pozitivno da utiču na mišiće na koži, krvne sudove, limfu pa čak i na nervni sistem.

Jednostavno rečeno, dugi infracrveni zraci utiču na to da ćelije u ovim delovima tela budu rezonante. Dugi infracrveni zraci greju telo iznutra proširujući arterije i vene čime se revitalizuje cirkulacija krvi i jača metabolizam, a tako se izazivaju hemijske reakcije u ćelijama. Rezultati su pročišćena krv i ojačana sposobnost revitalizacije.

*NASA je 80-ih godina prošlog veka zaključila da su stimulacije dugim infracrvenim zracima idealan način za astronaute da očuvaju kardiovaskularno kondicioniranje tokom dugih svemirskih letova.

Osobine serije turmalina:

Upotreba kamena turmalina za ispuštanje dalekog infracrvenog zraka, anjona i raznih mikroelemenata.

Prirodni turmalin sadrži raznovrsne mikroelemente kao što su Zn, Fe, Cu, Mn, Mg, Co, Se, Cr, Ti, Li, Ca, K, Na itd. koji su neophodni za ljudsko telo.

Osobine serije žada:

Upotreba kamena žada za ispuštanje dugih infracrvenih zraka emituje oko 2,5 – 13,5 mikrona dugih infracrvenih zraka i to odgovara infracrvenim zracima samog ljudskog tela, tako da se zove „Zrak života“.

Osobine serije fotona:

Foton je jedna vrsta LED svetla, uklanja akne, promoviše kalogen, ubrzava cirkulaciju, različite vrste uklanjanja pigmentata, itd.

Ova nova tehnologija je sistemska primena fotosenzibilizatora, koga stimuliše foton, hemijski i biološki proces. On može uspešno da tretira širok spektar kožnih oboljenja bez nuspojava. Rad sa fotonima je jednostavan i ne zahteva kliničkog stručnjaka.


Tip svetlosnih izvora: LED gen biološkog talasa svetlosnih izvora

Dužina talasa: Crvena boja: 640 ±5nm >8000mcd

Kontrolna tabla



1. Fotonski taster
2. Fotonsko svetlo
3. Niska temperatura
4. Visoka temperatura
5. Uključeno grejanje

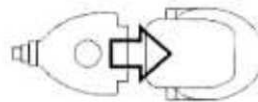

Konektor od daljinskog

Saveti za upotrebu

1. Povežite konektor koji je na mašini i daljinske.
2. Obezbedite ispravno napajanje, a zatim povežite utikač na lokalno napajanje.
3. Pritisnite taster za napajanje.
4. Podesite temperaturni prekidač na odgovarajuću temperaturu.
5. Vratite temperaturni prekidač i pritisnite taster za napajanje nakon upotrebe, uverite se da je utikač za napajanje isključen.

Obaveštenje

- Ne koristite je na vlažnom mestu, ne opterećujte je.
- Ne koristite je pola sata posle jela.
- Prestanite sa korišćenjem ako se osetite nelagodno.
- Koristite je kad spavate, isključite napajanje.
- Koristite u skladu sa savetom lekara kada ste trudni.
- Popijte 200ml vode da poboljšate metabolizam.
- Isključite napajanje pre čišćenja ili nakon upotrebe.
- Ne savijajte pri upotrebi.
- Poželjno je kada se koristi na sebi da imate pamučnu majicu bele boje.

Način korišćenja

- Potrebno je na sebi imati pamučnu garderobu (sintetika blokira dugi IC zrak)
- Popiti 2-3 čaše vode više nego obično (brža detoksikacija)
- Temperatura mora da prija (nikako da prži ili da osećamo uznemirenost)
- Koristiti 2 puta dnevno po 15-20 min.
- Početi sa temperaturom od 45c prvih mesec dana, a kasnije povećati na 50c
- Temperaturu možemo postepeno povećavati i do 70c, ali je bitno to raditi postepeno i jako je važno da nam prija ta toplota.
- Podlogu postavljamo na krevet ispod leđa od ramenog dela
- Možemo je staviti preko stomaka uzduž – od ispod grudi
- Preko stomaka i kolena
- Postaviti podlogu na krevet i leći preko nje tako da glava bude okrenuta u stranu, a ruke pored tela. Blago se ljuljati levo – desno da bi izmasirali stomak (stimulišemo izbacivanje nagomilanih stolica)
- Može se zagrejati i poneti u auto ako idemo na neki duži put, jer duo zadržava toplotu i čuva leđni deo od ukočenosti
- Možemo tretirati bolna i umorna stopala na polozi

Upozorenje

- Koristite ovu jedinicu samo za njenu namenjenu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovu jedinicu nikada ne treba ostaviti bez nadzora kada je uključena. Isključite je iz izvora napajanja kad se ne koristi i pre dodavanja ili uklanjanja adaptera.
- Pomno nadgledanje je neophodno kad ovu jedinicu koriste deca ili invalidi ili se koristi blizu njih.
- Nikada ne ispuštajte niti ubacujte bilo kakav predmet u bilo kakav otvor.
- Ne koristite tamo gde se koriste aerosol sprej proizvodi ili gde je nivo kiseonika visok.
- Ne nosite ovu jedinicu pomoću kabla i ne koristite kabl kao ručku.
- Da biste je diskonektovali, isključite sve kontrolere, a zatim uklonite utikač iz izvora napajanja.
- Trudnice, osobe koje imaju pejsmejker, usled skorašnje operacije, treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre korišćenja ove jedinice.

Oprez

- Kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja, ne izlažite ovu jedinicu kiši (vodi), vlagi, niti direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Nikada ne pokrivajte jedinicu kada radi.
- Prekomerna upotreba u bilo koje vreme može dovesti do prekomernog pregrevanja koje skraćuje životni vek ove jedinice. Ako se ovo desi, prekinite upotrebu i dozvolite jedinici da se ohladi pre rada.
- Nikada ovu jedinicu ne koristite direktno na nateklim/upaljenim poručjima kože niti na području erupcije kože.
- Ova jedinica nije profesionalna i dizajnirana je a obezbedi umirujuće nisku toplotu područjima koje dodiruje. Ne koristite je kao zamenu za medicinsku negu.
- Ne ostavljajte proizvod uključen isuviše dugo. Ova jedinica može da vas učini pospanim.
- Ne ostavljajte jedinicu priključenu na izvor napajanja kad korisnik nije u prostoriji.
- Ne ispuštajte proizvod. To može oštetiti jedinicu.

Osobine VLF serije:

- VLF označava veoma dug talas, on radi pri frekvenciji od 3000 mikrovibracija u minuti.
- Postoje VLF urađaji sa 4 tačke postavljeni u srednjem delu dušeka, VLF dubinski masira nerve kičme.
- On pomaže u povećanju aktivnosti ćelija tela kako bi se poboljšao metabolizam.
- Poboljšava prirodnu sposobnost tela za samoizlečenje.
- Magnet VLF-a može da namagnetise prljavštinu tela, da ukloni toksine pričvršćene za krvne sudove, da pročisti krv, poboljša cirkulaciju i tok dobrih meridijana u očuvanju zdravlja.

Fotonska bio podloga

Specifikacija:

Podloga za zagrevanje

Model: PR-C06

Dimenzije: 47x100cm

Napajanje: AC220-240V, 50Hz,
100W



Uvoznik: LUPO HOME LINE d.o.o. Beograd

Distributer: PR WT LINE Beograd
WT GROUP d.o.o. Beograd